

Manuale d'istruzioni Visiera Protettiva

Descrizione:


Le visiere protettive sono progettate per la protezione del viso e degli occhi contro impatti di livello base. Sono leggere e comode da indossare. Durante l'utilizzo di queste visiere devono essere sempre indossati ulteriori dispositivi di protezione per gli occhi, come occhiali protettivi. I materiali utilizzati per queste visiere non contengono sostanze note per causare reazioni allergiche. Tuttavia, è possibile che alcuni soggetti particolarmente sensibili sviluppino reazioni allergiche ai materiali impiegati.

Normativa:

Queste visiere protettive sono conformi al regolamento attraverso la norma europea armonizzata ISO 16321-1:2022

Montaggio della visiera:

Far scorrere le scanalature della visiera nei perni girevoli, quindi ruotare i perni girevoli per fissare saldamente la visiera.

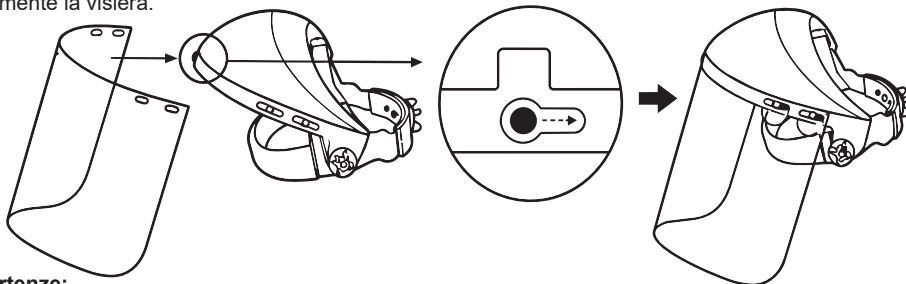

Avvertenze:

Le visiere protettive offrono solo una protezione limitata e non sono infrangibili. Oggetti di grandi dimensioni e/o oggetti ad alta velocità possono rompere o perforare la visiera e causare lesioni al viso o agli occhi dell'utilizzatore. I dispositivi di protezione oculare particelle ad alta velocità indossati sopra occhiali oftalmici standard possono trasmettere gli impatti, creando quindi un rischio per l'utilizzatore. Qualsiasi visiera danneggiata deve essere sostituita immediatamente. I dispositivi di protezione che hanno subito un impatto non devono essere utilizzati e devono essere scartati e sostituiti.

Specifiche:

Materiale delle lenti: polycarbonato. Trasmissione luminosa: 90%

Marchatura sulla visiera:

Standard Europei — 16321-1:2022 VAM E 1

Marchio del produttore
CE — Marchatura CE

Compatibilità della marchatura:

Se i simboli del livello di impatto non sono uguali sia sulla lente/filtro sia sulla montatura, al dispositivo di protezione completo deve essere assegnato il livello inferiore. Le protezioni corrispondenti ai codici/lettere 7, 9, CH sono garantite dal dispositivo completo solo se i rispettivi simboli sono identici sia sulla lente sia sulla montatura.

UTILIZZO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:

Durante l'utilizzo, assicurarsi che la visiera si adatti comodamente al viso. Questo dispositivo di protezione oculare deve essere conservato in un'apposita custodia, lontano dalla luce diretta del sole, da sostanze chimiche e materiali abrasivi, in un ambiente pulito, asciutto e privo di polvere quando non viene utilizzato o durante il trasporto. Per la pulizia, risciacquare con una soluzione all'1% di detergente delicato e asciugare con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi. **NON UTILIZZARE** detergenti abrasivi. Se necessario, può essere utilizzato un disinfettante domestico non aggressivo.

Durata utile:

Il periodo di validità di questo prodotto è di 3 anni.

CE REGOLAMENTO (UE) 2016/425
EN ISO 16321-1:2022 E



MED Consulting S.r.l.
Via Revello 38M, 12037
Saluzzo (CN) - Italy
info@medconsulting.it

Test & Certification Notified Body
ALIENOR CERTIFICATION - N°2754
ZA DU SANITAL 21 RUE ALBERT EINSTEIN
86100 CHATELLERAULT France

La Dichiarazione di Conformità UE
è disponibile sul sito web: www.medconsulting.it

MADE IN CHINA

Face Shield Instruction Manual

Description:


The face shields are designed for face and eye protection against basic impact level. They are light by weight and comfortable to wear. Additional eye protection such as spectacles or Goggles must be worn at all times when using these face shields. The materials used these face shield do not contain any substances known to cause allergic reactions. However, it may be possible for certain susceptible individuals to develop allergies to the material used.

Standards:

These protective face shields comply with the Regulation through the harmonized European standard ISO 16321-1:2022.

Fitting Visor:

Sliding the visor slots into the swivel posts, turning the swivel posts to hold the visors firmly.

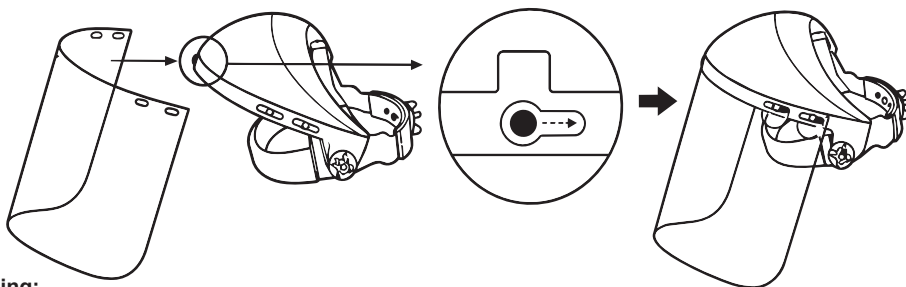

Warning:

Faceshields only provide limited protection and are not unbreakable. Large objects and/or objects at high speeds may break or penetrate the faceshield and injure the wearer's face or eyes. Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer. Any damaged faceshield must be replaced immediately. If protection against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer. Protectors that have been subject to impact shall not be used and shall be discarded and replaced.

Specifications:

Material lenses: polycarbonate. Luminous transmittance: 90%

Marking on the shield:

EN Standard — 16321-1:2022 VAM E 1  Identification of the manufacturer — CE Marking

Compatibility of Marking:

If the impact level symbols are not equal on both the lens/filter and the frame, then it is the lower level that shall be assigned to the complete protector. The protections corresponding to the code numbers/letter 7, 9, CH are provided by the complete protector only if the respective symbols are equal on both the lens and the frame.

USAGE, STORAGE, AND MAINTENANCE:

In use, ensure the face shield fits comfortably over the face. This eye protector should be stored in a case, out of direct sunlight, away from chemicals and abrasive substances, in a clean, dry, dust-free environment when not in use or during transportation.

To clean, rinse in 1% solution of mild detergent and dry with a dry fluff-free soft cloth. DO NOT USE abrasive cleansers. If necessary, a non-aggressive household disinfectant may be used.

Service life:

The period of obsolescence of this product is 3 years.

 REGULATION (EU) 2016/425
EN ISO 16321-1:2022 E



MED Consulting S.r.l.
Via Revello 38M, 12037
Saluzzo (CN) - Italy
info@medconsulting.it

Test & Certification Notified Body
ALIENOR CERTIFICATION – N°2754
ZA DU SANITAL 21 RUE ALBERT EINSTEIN
86100 CHATELLERAULT France

La Dichiarazione di Conformità UE
è disponibile sul sito web: www.medconsulting.it

MADE IN CHINA